

PACKAGING


MEDIMASK N95

Protection Respirator

BOX - 30 PIECES



INDIVIDUAL BAG - 1 PIECE

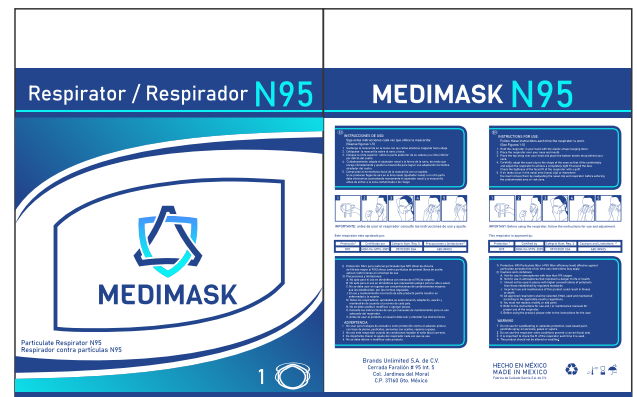

BOX

MEDIMASK N95

Protection Respirator



www.medimask.mx

BAG

MEDIMASK N95

Protection Respirator

Respirator / Respirador N95



MEDIMASK

Particulate Respirator N95
Respirador contra partículas N95

1

MEDIMASK N95

INSTRUCCIONES DE USO:
Siga estas instrucciones cada vez que utilice la mascarilla.
(Veremos Figuras 1-5)

1. Sostenga la mascarilla en la mano con las cintas elásticas colgando hacia abajo.
2. Coloque la mascarilla sobre el nariz y boca.
3. Coloque la cinta superior sobre la parte posterior de su cabeza y la cinta inferior por debajo del cuello.
4. Cuidadosamente, ajuste el ajustador nasal a la forma de la nariz, de modo que ajuste cómodamente y aprete la mascarilla para lograr una adaptación hermética alrededor del rostro.
5. Compruebe el funcionamiento facial de la mascarilla con un paño.

Si se producen fugas de aire en el área nasal (ajustador nasal) o en otra parte debe eliminarla inmediatamente reemplazando el ajustador nasal y la mascarilla antes de entrar a la zona contaminada o de riesgo.

INSTRUCTIONS FOR USE:
Follow these instructions each time the respirator is worn.
(See Figures 1-5)

1. Hold the respirator in your hand with the elastic straps hanging down.
2. Place the respirator over your nose and mouth.
3. Place the top strap over your head and place the bottom elastic strap behind your neck.
4. Carefully, adjust the nasal clip to the shape of the nose so that it fits comfortably and adjust the respirator to achieve a completely tight fit around the face.
5. Check the tightness of the facial fit of the respirator with a puff.

If air leaks occur in the nasal area (nasal clip) or elsewhere, you must remove them by readjusting the nasal clip and respirator before entering the contaminated area or risk zone.

IMPORTANTE: antes de usar el respirador consulte las instrucciones de uso y ajuste.

Este respirador está aprobado por:

Protección ¹	Certificado por	Categoría Num. Reg. S.	Precauciones y limitaciones ²
N95	NOM-16-STPS-2009	093IC2020 SSA	ABC, JMMMS

1) Protección: filtro para material particulado tipo N95 (nivel de eficacia de filtrado mayor al 95%) eficaz contra partículas de aerosol de aceite.

2) Precauciones y limitaciones:

- A. No apto para el uso en atmósferas con menos de 10% de oxígeno.
- B. No apto para el uso en atmósferas que representen peligro para la vida o salud.
- C. No se debe usar en lugares con concentraciones de contaminantes mayores que las establecidas por las normas reguladas.
- D. El uso y mantenimiento incorrecto de este producto podría resultar en una lesión o la muerte.
- E. Todos los respiradores aprobados se seleccionarán, usarán y mantendrán de acuerdo a la forma de este país.
- F. No se debe sanear, modificar o agregar partes.
- G. Consulte las instrucciones de uso y/o manuales de mantenimiento para un uso adecuado del respirador.
- H. Antes de usar el producto, el usuario debe leer y entender las instrucciones.

ADVERTENCIA:

1. No usar para trabajos de aerosol o como protección contra el aerosol, pintura con base de plomo, pesticidas, aerosoles con aceites, vapores o gases.
2. No use este respirador cuando las condiciones impidan el sello facial correcto.
3. Es importante chequear el ajuste del respirador cada vez que se use.
4. No se debe alterar ni modificar este producto.

IMPORTANT: Before using the respirator, follow the instructions for use and adjustment.

This respirator is approved by:

Protection ¹	Certified by	Categoria Num. Reg. S.	Cautions and Limitations ²
N95	NOM-16-STPS-2009	093IC2020 SSA	ABC, JMMMS

1) Protection: N95 Particulate filter (95% filter efficiency level) effective against particulate aerosols free of oil. Use restrictions may apply.

2) Cautions and Limitations:

- A. Not for use in atmospheres with less than 10% oxygen.
- B. Not for use in atmospheres that represent a danger to life or health.
- C. Should not be used in places with higher concentrations of pollutants than those established by regulated standards.
- D. Incorrect use and maintenance of this product could result in illness or death.
- E. All approved respirators shall be selected, fitted, used and maintained according to the applicable country regulations.
- F. No must not clean, modify or add parts.
- G. Refer to the instructions for use and / or maintenance manuals for correct use of the respirator.
- H. Before using the product, please refer to the instructions for the user.

WARNING:

1. Do not use for sandblasting or asbestos protection, lead-based paint, pesticide sprays, oil aerosols, vapors or gases.
2. Do not use this respirator when conditions prevent a correct facial seal.
3. It is important to check the fit of the respirator each time it is used.
4. This product should not be altered or modified.

Brands Unlimited S.A. de C.V.
Cerrada Farallón # 95 Int. 5
Col. Jardines del Moral
C.P. 37160 Gto. México

HECHO EN MÉXICO
MADE IN MEXICO
Fabrica de Calzados García S.A. de C.V.



www.medimask.mx